



**COMFORT-  
DENT**

**Каталог**

## Валик под поясницу



Упругий валик Comfort-Dent подходит для любого типа стоматологической установки. Позволяет снять усталость в области поясницы во время длительного стоматологического приема. Доступны любые расцветки из представленных на сайте.

**Размеры:** высота - 8.5 см, Ширина - 17 см; Длина - 45 см.

## Мешок для сбора пыли стоматологический



Аналог фильтра-мешка для сбора пыли стола зубного техника "Рамтес-Комета".

## Ортопедическая подушка «Comfort-Dent Lux»



**Comfort-Dent подушка** - это ортопедическое изделие, предназначенное для удобства пациента во время стоматологического лечения, а также для защиты покрытия кресел стоматологических установок.

**Наполнение:** Специальный вязкоупругий термочувствительный материал, обладающий памятью формы.

**Обивка:** Используется ткань с полиуретановым покрытием, очень мягкая и эластичная. Она абсолютно водонепроницаемая, но в то же время способна "дышать".

Модель доступна в четырёх расцветках: Lux white, Lux gray, Lux green, Lux blue.

При производстве ортопедических изделий «Comfort-Dent» используются самые современные материалы. Специальный вязкоупругий термочувствительный материал, обладающий памятью формы, определяет основные свойства подушки. Его структура представляет собой множество ячеек-пузырьков с микроскопическими отверстиями в стенках. При нажатии на материал воздух через эти отверстия перетекает из одной ячейки в другую, за счёт чего происходит поглощение энергии давления. Кроме этого, возможность циркуляции воздуха через отверстия между ячейками обеспечивает внутреннюю вентиляцию материала. Обладая этими свойствами, он способен подстраиваться под очертания тела и не оказывает неприятного сопротивления. Не чувствуя давления, пациент оказывается будто в невесомости.

Для изготовления наволочек модели Comfort-Dent Lux используется специальная ткань с полуретановым покрытием, очень мягкая и эластичная. Она абсолютно водонепроницаемая, но в то же время способна "дышать", позволяет легко удалять любые загрязнения, выдерживает машинную стирку в 95 градусов и даже обработку в автоклаве при температуре до 130 градусов. Наполнитель не подлежит стирке на всём периоде эксплуатации, т.к. он обработан специальным средством, предупреждающим рост микроорганизмов.

### **Характеристики**


Размер (мм): 200\*230\*85



## Ортопедический матрас «Comfort-Dent Elite»





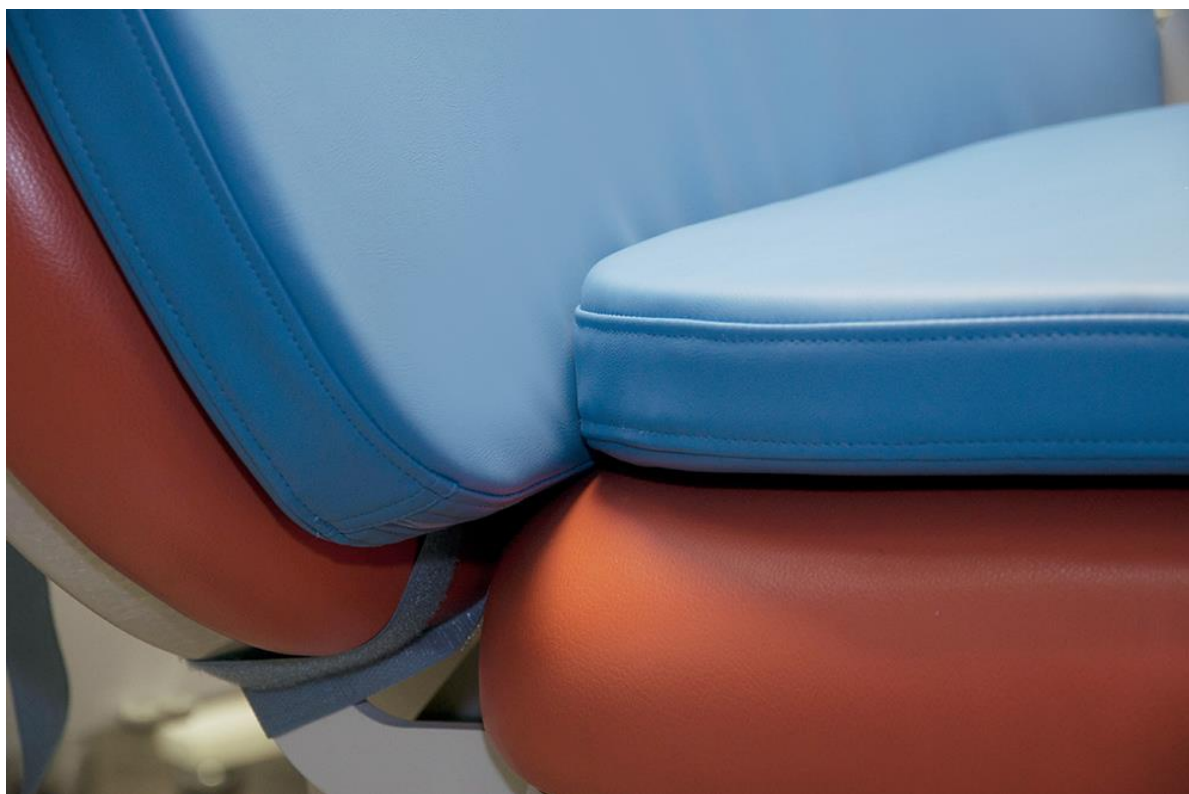

Ортопедический матрас Comfort-Dent Elite подойдёт для стоматологического кресла любого типа. В комплект Elite входит:



подголовник анатомический - 1 шт., спинка - 1 шт., сиденье - 1 шт., чехол защитный области ног для сиденья - 1 шт.

Наволочки модели изготовлены из плотной ткани на синтетической основе с виниловым покрытием. В качестве наполнителя используется пенополиуретан повышенной плотности. Это наиболее прочная модель, стойкая к механическим повреждениям и легко обрабатываемая.

наиболее прочная модель, стойкая к механическим повреждениям и легко обрабатываемая.

### Цвета



### Размеры

Высота спинки - 51 см, Ширина спинки - 30 см (в узкой части), 62 см (в широкой части); Длина сидухки - 115 см, ширина сидухки - 36 см (в узкой части), 47 см (в широкой части); Толщина - 5 см.

## Ортопедический матрас «Comfort-Dent Lux»



Ортопедический матрас Comfort Dent Lux подходит для любого типа стоматологического кресла. В комплект поставки входит защитное покрытие (спинка и сиденье соединены) - 1 шт.

### **Размеры**

Высота спинки - 50 см, Ширина спинки - 45 см; Длина сидухки - 75 см, ширина сидухки - 45 см; Толщина - 4 см

Матрас Lux - это ортопедическое изделие, предназначенное для удобства пациента во время стоматологического лечения, а также для защиты покрытия кресел стоматологических установок.

## **Наполнение**

Специальный вязкоупругий термочувствительный материал, обладающий памятью формы.

Для обивки используется ткань с полиуретановым покрытием, очень мягкая и эластичная. Она абсолютно водонепроницаемая, но в то же время способна "дышать".

## **Цвета**

Модель доступна в четырёх расцветках: Lux white, Lux gray, Lux green, Lux blue.

## **Неоспоримые преимущества для клиники:**

- повышенный комфорт для пациента, особенно при длительном лечении;
- сохранение материала обивки кресла;
- изделие скрывает имеющиеся дефекты обивки (потёртости, порезы, пятна, царапины и т.д.) и обновляет внешний вид установки.
- 

При производстве ортопедических матрасов «Comfort-Dent Lux» используются самые современные материалы. Специальный вязкоупругий термочувствительный материал, обладающий памятью формы, определяет основные свойства матраса. Его структура представляет собой множество ячеек-пузырьков с микроскопическими отверстиями в стенках. При нажатии на материал воздух через эти отверстия перетекает из одной ячейки в другую, за счёт чего происходит поглощение энергии давления. Кроме этого, возможность циркуляции

воздуха через отверстия между ячейками обеспечивает внутреннюю вентиляцию материала. Обладая этими свойствами, он способен подстраиваться под очертания тела и не оказывает неприятного сопротивления. Не чувствуя давления, пациент оказывается будто в невесомости.

Для изготовления наволочек модели Comfort-Dent Lux используется специальная ткань с полуретановым покрытием, очень мягкая и эластичная. Она абсолютно водонепроницаемая, но в то же время способна "дышать", позволяет легко удалять любые загрязнения, выдерживает машинную стирку в 95 градусов и даже обработку в автоклаве при температуре до 130 градусов. Наполнитель не подлежит стирке на всём периоде эксплуатации, т.к. он обработан специальным средством, предупреждающим рост микроорганизмов.

## Универсальный защитный чехол для стоматологического кресла



**Защитный чехол Comfort Dent** предназначен для защиты СТОМАТОЛОГИЧЕСКОГО КРЕСЛА в области ног. Подходит для любого типа стоматологической установки.