




EyeMag Pro

Каталог

EyeMag™ - Медицинские лупы для стоматологов и хирургов

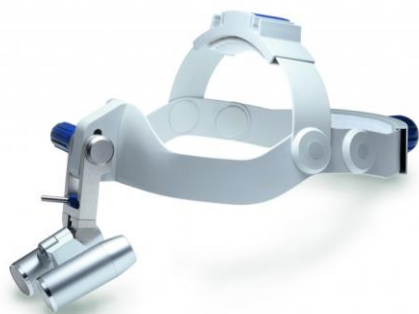

Медицинские лупы EyeMag инновационные, функциональные оптические системы , которые предлагают пользователю великолепное качество , комфортабельную эргономичную посадку, современный дизайн.

Модельный ряд состоит из двух приборов: EyeMag Smart и EyeMag Pro.

Основные целевые направления : нейро/спинальная, пластическая/ реконструктивная хирургия, стоматология.

EyeMag Pro операционные лупы от Carl Zeiss на шлеме и на очках воплощение Кеплеровских технологий. Они являются улучшенной модификацией луп KF и KS. Лупы рекомендованы для простых оперативных вмешательств, рекомендованное увеличение от 3.2 до 5x , рабочее расстояние от 300-500мм. Основные пользователи стоматологи и хирурги.

Преимущества луп Pro F EyeMag и Pro S EyeMag включают простоту и легкость в использовании и быстрое регулирование. Выбрать подходящую лупу поможет широкий диапазон рабочих расстояний и увеличений. Заказчик может выбрать между лупой на титановой оправе (F) и на шлеме (S). Налобная лупа EyeMag Pro S применяется для объемного стереоскопического наблюдения вблизи. Она предназначена для применения в медицине, в лаборатории и промышленности. Индивидуальная регулировка осуществляется самостоятельно очень просто с помощью тест - карты и входящего в объем поставки ключа Torx.



Оптическая система установлена на держателе системы S, он состоит из гибкой оправы с шарнирами и лентами. Оптическая система поставляется с разными

увеличениями и рабочими расстояниями.

При аметропии только применение индивидуальных корректирующих линз гарантирует соблюдение технических

характеристик налобной лупы. Поэтому при аметропии используйте лупу вместе с индивидуальными линзами.

Их современный дизайн делает эти лупы идеальным оптическим инструментом, отвечающий самым высоким требованиям микрохирургов.

Преимущества луп EyeMag Pro :

- Точность изображения
- Высококачественное изображение и достоверная цветопередача – великолепный обзор периферийных зон
- Глубина изображения, позволяющая работать в глубоких и узких каналах
- Большое поле для оптимального обзора
- Работа в комфорте
- Лупа позволяет обеспечить эргономичную, комфортную посадку в момент лечения. Равномерное распределение веса дает возможность работать с увеличением длительный период
- Несложные операции
- Быстрая настройка индивидуальных параметров : межзрачкового расстояния , угла наклона, быстрое, с помощью щелчка откидывание лупы вверх облегчает использование и коммуникацию с пациентом.

Технология

Первые шаги

Лупа EyeMag Pro S легко и быстро настраивается под любого пользователя и может как использоваться несколькими пользователями без потери качества, так и быть зафиксирована под настройки определенного пользователя.

Налобная лупа обеспечивает Вам в любое время прямое положение и небольшой наклон головы. Это способствует работе без напряжения при коротком и продолжительном применении.

Через окуляры, расположенные близко к очковой линзе, Вы получаете большие однородные поля зрения, которые дают Вам оптимальную возможность видеть все поле лечения.

Функция Flip-Up

Если лупа не используется, ее можно откинуть вверх с помощью функции Flip-Up. Эта функция позволяет Вам сохранить зрительный контакт с пациентом во время работы.

Оптико-волоконное освещение

Лупа EyeMag Pro S может использоваться с источником освещения Shott, позволяющим обеспечить гомогенное

распределение света в операционном поле, освещение узких каналов.

Возможно использование желтого фильтра для работы с пломбировочным материалом. (опция).